

# Sistema HemoCue® Hb 201+



## El estándar para una precisión constante

El sistema HemoCue® Hb 201+, preciso y fácil de utilizar, se ha convertido en el estándar de las pruebas point of care. Los profesionales sanitarios de todo el mundo necesitan obtener resultados inmediatos para poder tomar las decisiones correctas cuando más lo necesitan, especialmente en el point of care.

Gracias a nuestra asistencia y servicios específicos, así como a una exclusiva capacitación basada en más de 30 años de experiencia, puede contar con HemoCue para obtener las soluciones adecuadas para cubrir todas sus necesidades.

*La precisión empieza con nosotros*



Para obtener más información sobre el sistema HemoCue® Hb 201+, escanee el código QR con su teléfono inteligente o visite [hemocue.com](http://hemocue.com).

## Confíe en los resultados obtenidos en cabecera de paciente


- ▶ Calibración precisa de fábrica con el método de referencia ICSH.
- ▶ Tecnología patentada basada en microcubetas con excelente reproducibilidad entre lotes.
- ▶ Registro de fecha y hora para hasta 600 resultados.
- ▶ Disponibilidad de controles líquidos basados en sangre.

## Acceda fácilmente a una precisión con calidad de laboratorio


- ▶ Muestra de sangre total capilar, venosa o arterial.
- ▶ Rápida formación y prácticamente sin mantenimiento.
- ▶ Posibilidad de relacionar el resultado con el ID del paciente para incluirlos en el historial médico.
- ▶ Conexión a impresora.

# Sistema HemoCue® Hb 201+

Principio	Reacción de metahemoglobina azídica modificada; doble longitud de onda (570 nm y 880 nm) para compensar la turbidez
Calibración	Calibración de fábrica con el método de referencia ICSH; no necesita calibración adicional
Material de muestra	Sangre total capilar, venosa o arterial
Intervalo de medición	0–25,6 g/dL (0–256 g/L, 0–15,9 mmol/L)
Resultados	En menos de 60 segundos
Volumen de la muestra	~10 µL
Dimensiones	160 x 43 x 85 mm
Peso	350 g, pilas incluidas
Temp. de almacenamiento	Analizador: 0–50 °C Microcubetas: sin abrir a 15–30 °C; los viales abiertos permanecen estables tres meses
Temp. de funcionamiento	15–30 °C
Alimentación	Adaptador de CA o 4 pilas AA
Conexión	Impresora y HemoCue® Basic Connect™, incluido un lector de códigos de barras opcional
Control de calidad	Autocomprobación integrada; controles líquidos opcionales

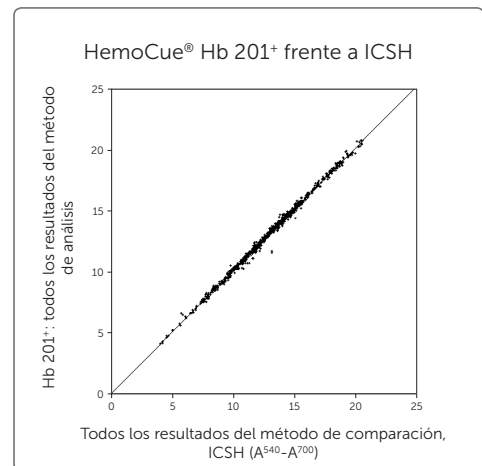

## Tres sencillos pasos

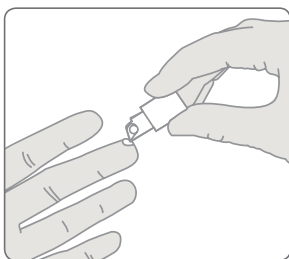

1 Llene la microcubeta.



2 Introduzca la microcubeta en el analizador.



3 Visualice los resultados.

HemoCue AB | PO Box 1204 | SE-262 23 Ängelholm | Suecia  
Teléfono: +46 77 570 02 10 | Fax: +46 77 570 02 12 | info@hemocue.se | hemocue.com

HemoCue ha liderado el diagnóstico médico en el ámbito point of care durante más de 30 años. Somos especialistas en ofrecer a los profesionales sanitarios resultados precisos con una calidad comparable a la de un laboratorio clínico.

